

14337 Total Blanc Home C - Manual Pac_Policro

84mm

DFL

TOTAL BLANC HOME C
CLAREADOR DENTAL

MANUAL DO PACIENTE
ORIENTAÇÕES AO PACIENTE EM TRATAMENTO

Venda sob prescrição

TOTAL BLANC HOME C CLAREADOR DENTAL

MANUAL DO PACIENTE
ORIENTAÇÕES AO PACIENTE EM TRATAMENTO

Português

Paciente: _____

Registro da cor antes do tratamento: _____

Data: ____/____/____

Tempo de aplicação do gel: _____


Leia com atenção as informações a seguir antes de utilizar o produto.

INSTRUÇÕES DE USO


1 - Usar fio dental e escovar os dentes.



2 - Encaixar a ponta de aplicação na seringa e colocar 1 gota do gel no espaço referente a cada dente na moldeira. Após o uso, tapar a seringa.

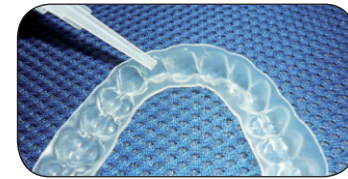

3 - Encaixar a moldeira nos dentes. Retirar o excesso de gel com algodão ou com a escova dental.

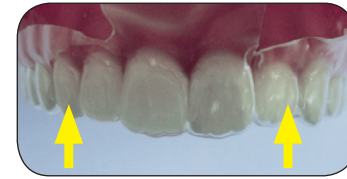

4 - Obedecer o tempo de permanência determinado pelo dentista.



5 - Remover a moldeira após o tempo determinado. Lavar e escovar os dentes com pasta de dente sem corante e sem bicarbonato de sódio.



6 - Lavar, secar e guardar a moldeira.



CUIDADOS DURANTE O TRATAMENTO

- Evitar fumar durante o período do clareamento.
- Não ingerir alimentos ácidos e refrigerantes.
- Não ingerir produtos que contenham corantes.
- Usar creme dental branco e sem bicarbonato de sódio.
- Não mastigar nem ingerir alimentos com a moldeira na boca.
- Evitar o contato do gel com a gengiva e pele. Aplicar na moldeira somente a quantidade necessária para cobrir os dentes, evitando excesso do material. Uma gota por dente é o suficiente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter fora do alcance das crianças, em local protegido de calor e luz direta. Armazenar o produto entre 5°C e 25°C. O produto é válido por até 2 anos após sua fabricação. Em condições de temperaturas superiores a 40°C poderá haver degradação química do produto, com perda da sua eficácia.

TOTAL BLANC HOME C BLANQUEADOR DENTAL

MANUAL DEL PACIENTE
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE EN TRATAMIENTO

Español

Paciente: _____

Registro del color antes del tratamiento: _____


Fecha: ____/____/____

Tiempo de aplicación del gel: _____


Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Usar el hilo dental y cepillarse los dientes.

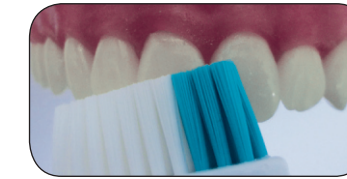

2 - Encajar la punta de aplicación de la jeringa y poner una gota de gel en el espacio referente a cada diente en la cubeta. Después del uso, tapar la jeringa.

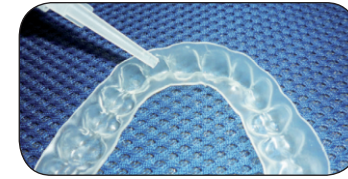

3 - Encajar la cubeta en los dientes. Retire el exceso de gel con un algodón o con un cepillo de dientes.



4 - Mantener la cubeta en la boca durante el tiempo determinado por el odontólogo.



640mm

5 - Retirar la cubeta después del tiempo prescrito. Lavar y cepillar los dientes con dentífricos blancos que no contengan bicarbonato de sodio.



6 - Lavar, secar y almacenar la cubeta.



CUIDADOS DURANTE EL TRATAMIENTO

- Evitar fumar durante el período del blanqueamiento.
- No ingerir alimentos ácidos ni bebidas gaseosas.
- No ingerir productos que contengan colorantes.
- Usar solamente dentífricos blancos que no contengan bicarbonato de sodio.
- No masticar o ingerir alimentos con la cubeta en la boca.
- Evitar que el gel entre en contacto con la encía y la piel. Poner en la cubeta apenas la cantidad necesaria para cubrir los dientes y evitar colocar demasiado material. Normalmente es suficiente una gota por diente

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar protegido del calor y de la luz directa. Conservar el producto a temperaturas entre 5°C y 25°C. La validez del producto es de dos años a partir de la fecha de fabricación. A temperaturas superiores a los 40°C el producto puede sufrir degradación química y perder su eficacia.

TOTAL BLANC HOME C DENTAL WHITENING

PACIENT MANUAL
INSTRUCTIONS FOR THE PACIENT IN TREATMENT
English

Pacient: _____

Record the color before treatment: _____

Date: ____ / ____ / ____

Time of gel application: _____


Carefully read the information below before using this product.

INSTRUCTIONS OF USE

1 - Floss and brush your teeth.



2 - Place the application tip to the syringe and put 1 drop of gel in space for each tooth in the tray. After use, cap the syringe.

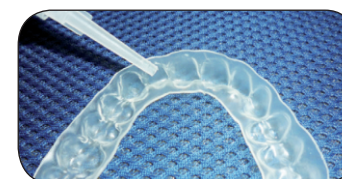

3 - Place the tray on the teeth. Remove excess gel with cotton or with a toothbrush.



4 - Obey the residence time determined by the dentist.



5 - Remove the tray after the prescribed time. Wash and brush your teeth with toothpaste without dye and without sodium bicarbonate.



6 - Wash, dry and store the tray.



STORAGE AND TRANSPORT

Keep out of children's reach, at a place away from heat and direct light. Store the product between 5°C and 25°C. The product is valid up to 2 years after its manufacture date. Under conditions where the temperature is above 40°C, there may be product chemical degradation, with its efficiency loss.

CARE DURING TREATMENT

- Avoid smoking during the bleaching.
- Do not ingest acid food and sodas.
- Do not ingest products which contain colorant.
- Use white toothpaste without sodium bicarbonate.
- Do not chew or ingest food with the tray in the mouth.
- Avoid gel contact with the gum and skin. Apply in the trays only the necessary amount to cover the teeth, avoiding the excess of material. A drop per tooth is enough.



Fabricado por:

DFL Indústria e Comércio S.A.
Estrada do Guerengê, 2059 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 22713-002 - CNPJ: 33112665/0001-46
SAC: 0800 602 68 80
www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br
Indústria Brasileira / Indústria Brasileira / Made in Brazil
Farmacêutico Responsável / Farmacêutico Responsável
Pharmacist in Charge: Renata Caroline
CRF-RJ N° 21674

Registro ANVISA N°: 80141430182

